



READ AND UNDERSTAND COMPLETE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE

Use with B&B ET Tape II #11010, ET Tape #11020, StabilTube #11060 or other endotracheal tube securing devices.

1. Secure the endotracheal tube per instructions or institution procedure. Gently pull the pilot balloon tube in a straight line toward the end of the endotracheal tube.
2. Starting with the Universal Bite Block at a slight angle, snap the bite block onto the endotracheal tube. Keeping the bite block at a slight angle, slide it onto the tube. Make sure the pilot balloon tube is in between the Universal Bite Block and the endotracheal tube (see figure B).
3. Pull the Universal Bite Block up until it rests against the endotracheal tube securing tape and rotate the bite block to the lateral position (see figure C).
4. Wrap the elongated tab of the Cable Tie around the securing tape where it wraps around the endotracheal tube and feed through retaining unit (see figure D).
5. After confirming proper tube placement, pull Cable Tie through retaining unit to secure to endotracheal tube and carefully cut the releasable Cable Tie 1/2 inch above retaining unit. Place Blue Safety Cap securely onto cut end of Cable Tie (see figure E).
6. To reposition or replace Universal Bite Block, carefully remove Blue Safety Cap from Cable Tie, release the locking tab and push excess Cable Tie through retaining unit (see figure F).


WARNING: If releasable Cable Tie is not used, Universal Bite Block must be securely taped to the endotracheal tube. If Cable Tie is not trimmed, remove and discard Blue Safety Cap in proper receptacle. Should endotracheal tube cuff filling problems occur, gently pull pilot balloon tube taut to remove any kinks.

NOTE: Periodically inspect the Universal Bite Block to assure proper position and function of the bite block. Universal Bite Block should be changed every three days for hygienic purposes.

CAUTION:

Single Patient Use Only • Disposable • Not Sterile
• DO NOT REUSE • DO NOT REPROCESS

An instructional application video can be found at www.bandb-medical.com/universal-bite-block-adult/

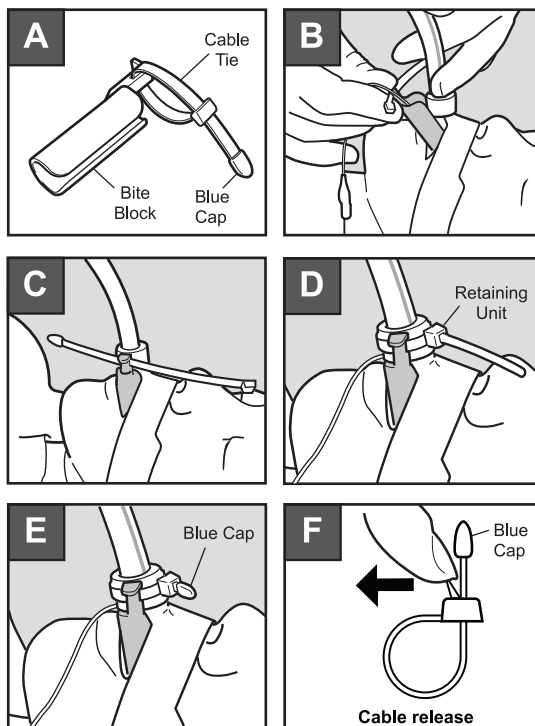

Medical Technologies
www.bandb-medical.com

Universal Bite Block™

Endotracheal Tube Bite Block

For Tube Sizes 6 mm to 9.5 mm

Contents: 1 UNIT

REF 11160




LOT



Not Made With
Natural Rubber Latex



CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on order of a physician.

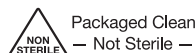

Manufactured for:
B&B Medical Technologies
1954 Kellogg Ave. Ste 100
Carlsbad, CA 92008 U.S.A.
Phone: +1.760.929.9972
Fax: +1.760.929.9953
www.bandb-medical.com

EC REP

EU Representative:

Scanlan Group B.V.
Postbus 75664
1118 ZS Schiphol Triport
The Netherlands
Phone: 31(0) 20-653-0553
Fax: 31(0) 20-653-3053

Patented
Assembled in Mexico
Form S116U Rev 1.4
© 2015 All rights reserved.



AVANT D'UTILISER, BIEN LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

Utiliser avec le ruban adhésif II pour sonde endotrachéale B&B n°11010, le ruban adhésif pour sonde endotrachéale n° 11020, StabiTube n° 11060 ou autres dispositifs d'attache pour sondes endotrachéales.

1. Bien insérer la sonde endotrachéale en suivant les instructions ou la procédure mise en place dans votre établissement. Tirer doucement sur le ballonnet témoin en une ligne droite vers l'extrémité de la sonde endotrachéale.
2. En orientant la pièce de morsure universelle Universal Bite Block suivant une légère inclinaison, emboîter la pièce de morsure sur la sonde endotrachéale. En maintenant l'angle de la pièce de morsure, la faire glisser sur le tube. Être certain que le tube de ballonnet témoin se trouve entre la pièce de morsure Universal Bite Block et la sonde endotrachéale (figure B).
3. Tirer la pièce de morsure Universal Bite Block vers le haut jusqu'à ce qu'elle repose contre le ruban adhésif d'attache de la sonde endotrachéale et faire tourner la pièce de morsure pour la mettre en position latérale (figure C).
4. Déployer la languette allongée de l'attache de câble autour du ruban adhésif à l'endroit où il couvre le pourtour de la sonde endotrachéale et faire passer dans la pièce de retenue (figure D).
5. Après avoir confirmé le bon placement de la sonde, tirer l'attache

de câble à travers la pièce de retenue pour bien le fixer à la sonde endotrachéale et couper soigneusement l'attache de câble détachable environ 1,2 cm au-dessus de la pièce de retenue. Placer le bouchon de sécurité bleu sur l'extrémité coupée de l'attache de câble (figure E).

6. Pour repositionner ou remplacer la pièce de morsure Universal Bite Block, retirer soigneusement le bouchon de sécurité bleu de l'attache de câble, relâcher la languette de verrouillage et pousser l'attache câble en trop à travers la pièce de retenue (voir figure F).

AVERTISSEMENT: Si une attache de câble détachable n'est pas utilisée, Universal Bite Block doit être fixé avec du ruban adhésif à la sonde endotrachéale. Si l'attache de câble n'est pas taillée, retirer et mettre le bouchon de sécurité bleu de côté dans un récipient adéquat. En cas de problèmes de remplissage du manchon de la sonde, tirer doucement sur le tube de ballonnet témoin pour le tendre afin d'éliminer toute pliure.

REMARQUE: Inspecter la pièce de morsure Universal Bite Block pour assurer son bon positionnement et permettre son bon fonctionnement. La pièce de morsure Universal Bite Block doit être changée tous les trois jours pour des raisons d'hygiène.

ATTENTION: À usage unique • Jetable • Non stérile
• NE PAS RÉUTILISER • NE PAS RETRAITER

Vous pouvez visionner une vidéo d'instruction à l'adresse www.bandb-medical.com/universal-bite-block-adult/



VOR DEM GEBRAUCH MÜSSEN SIE DIE KOMPLETTE ANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN

Zur Verwendung mit dem B&B ET-Band II (Ref.-Nr. 11010), ET-Band (Ref.-Nr. 11020), StabiTube (Ref.-Nr. 11060) oder anderen Sicherungsvorrichtungen für Endotrachealtuben.

1. Sichern Sie den Endotrachealtubus entsprechend der Anleitung oder dem Einführverfahren. Ziehen Sie den Pilotballonschlauch vorsichtig in gerader Richtung zum Ende des Endotrachealtubus.
2. Beginnen Sie, indem Sie den Universal Bite Block leicht schräg halten. Klemmen Sie ihn am Endotrachealtubus fest. Halten Sie den Universal Bite Block weiterhin leicht schräg und schieben Sie ihn auf den Tubus. Stellen Sie sicher, dass sich der Pilotballonschlauch zwischen dem Universal Bite Block und dem Endotrachealtubus befindet (siehe Abbildung B).
3. Ziehen Sie den Universal Bite Block nach oben, bis er das Sicherungsband des Endotrachealtubus berührt. Drehen Sie ihn dann zur Seite (siehe Abbildung C).
4. Wickeln Sie die längere Kabelbinderlasche um das Sicherungsband und somit auch um den Endotrachealtubus und führen Sie sie dann durch die Haltevorrichtung (siehe Abbildung D).
5. Nach dem Sie sich vergewissert haben, dass der Tubus korrekt platziert ist, ziehen Sie den Kabelbinder durch die Haltevorrichtung, um den Endotrachealtubus zu sichern.

Schneiden Sie die herausragende Kabelbinderlasche 1,27 cm (1/2 Zoll) über der Haltvorrichtung ab. Setzen Sie die blaue Sicherheitskappe auf das abgeschnittene Ende des Kabelbinders (siehe Abbildung E).

6. Wenn Sie den Universal Bite Block neu positionieren oder austauschen müssen, entfernen Sie die blaue Sicherheitskappe vorsichtig vom Kabelbinder, lösen Sie die Verriegelungszunge und drücken Sie die herausragende Kabelbinderlasche durch die Haltevorrichtung (siehe Abbildung F).

WARNUNG: Falls kein wiederlösbarer Kabelbinder verwendet wird, muss der Universal Bite Block mit Klebeband am Endotrachealtubus befestigt werden. Falls der Kabelbinder nicht abgeschnitten wird, entfernen und entsorgen Sie die blaue Sicherheitskappe in einem entsprechenden Behälter. Sollte sich die Manschette (Cuff) des Endotrachealtubus füllen, ziehen Sie den Pilotballonschlauch zum Entfernen etwaiger Knicke straff.

HINWEIS: Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Universal Bite Block korrekt positioniert ist und einwandfrei funktioniert. Der Universal Bite Block sollte aus Hygienegründen alle drei Tage ausgewechselt werden.

ACHTUNG: Nur für den Gebrauch an einem Patienten

- Einwegartikel • Nicht steril • NICHT WIEDERVERWENDEN
- NICHT WIEDERAUFBEREITEN

Ein Demonstrationsvideo zur Anwendung finden Sie unter www.bandb-medical.com/universal-bite-block-adult/



LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

Para uso con B&B ET Tape II #11010, ET Tape #11020, StabiTube #11060 u otro dispositivo para fijar tubos endotraqueales.

1. Fije el tubo endotraqueal según las instrucciones o el procedimiento del centro. Retire suavemente el tubo del globo piloto en línea recta hacia el extremo del tubo endotraqueal.
2. Comenzando con Universal Bite Block levemente inclinado, encastre el bloqueo de mordida en el tubo endotraqueal. Mantenga el bloqueo de mordida levemente inclinado y deslicelo por el tubo. Asegúrese de que el globo piloto quede entre Universal Bite Block y el tubo endotraqueal (ver figura B).
3. Tire de Universal Bite Block hacia arriba hasta que quede apoyado en el tubo endotraqueal fijando la cinta y gire el bloqueo de mordida hacia la posición lateral (ver figura C).
4. Envuelva la lengüeta alargada del sujetacable alrededor del tubo endotraqueal y pásela por la unidad de sujeción (ver figura D).
5. Una vez confirmada la correcta colocación del tubo, tire del sujetacable para que pase por la unidad de sujeción para fijar el tubo endotraqueal y corte con cuidado el sujetacable libre 1/2

pulgada (aprox. 1,25 cm) por encima de la unidad de sujeción. Coloque el tapón azul de seguridad en el extremo cortado del sujetacable (ver figura E).

6. Para reubicar o cambiar Universal Bite Block, retire con cuidado el tapón azul de seguridad del sujetacable, libere la traba y empuje el excedente de cable por la unidad de sujeción (ver figura F).

ADVERTENCIA: Si no se usa el sujetacable libre, Universal Bite Block debe sujetarse bien con cinta al tubo endotraqueal. Si no se corta el sujetacable, retire y deseche el tapón azul de seguridad en un recipiente adecuado. En caso de que se produzcan problemas de llenado del manguito, retire suavemente el tensor del tubo del globo piloto para eliminar cualquier pliegue.

NOTA: Compruebe periódicamente que Universal Bite Block conserva su posición y el dispositivo funciona correctamente. Por motivos de higiene, Universal Bite Block debe cambiarse cada tres días.

ADVERTENCIA: Para uso en un solo paciente • Desechable
• No estéril • NO REUSAR • NO REPROCERAR

Encontrará un video con las instrucciones de aplicación en www.bandb-medical.com/universal-bite-block-adult/