


# E.T. Tape II™

## Endotracheal Tube Holder With Releasable Cable Tie

Contents: 1 UNIT

**REF** 11010

**LOT**

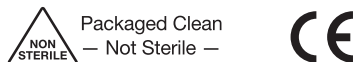

**2** — Disposable —  
Single Patient Use Only  
**DO NOT REUSE**

Not Made With  
Natural Rubber Latex



Caution: Federal (USA) Law restricts this device to sale by or on order of a physician.

**Manufactured for:**  
B&B Medical Technologies  
1954 Kellogg Ave. Ste 100  
Carlsbad, CA 92008 U.S.A  
Phone: +1.760.929.9972  
Fax: +1.760.929.9953  
www.bandb-medical.com

**EC REP** **EU Representative:**  
MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover Germany  
Phone: +49 511 62628630  
www.mdssar.com







### READ AND UNDERSTAND COMPLETE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE

1. Clean and dry the patient's skin and E.T. Tube application area. Be sure all moisture, oils and secretions are removed.
2. Apply the supplied skin preparation solution to both the skin and E.T. Tube application areas and fan dry for 25 seconds.
3. Peel backing from Part A. Secure the E.T. Tape II™ to the patients skin with the T-Tab directly over the desired E.T. Tube location (see Fig. A).
4. Wrap the short leg of the T-Tab around the E.T. Tube.
5. Tightly wrap the long leg of the T-Tab around the tube overlapping the short leg. This wrap must be tight as to compress the foam, eliminating any gaps which would allow secretions to get between the E.T. Tape II and the E.T. Tube (see Fig. B).
6. Wrap Cable Tie around T-tab, endotracheal tube and Bite Block #11040 or #11160 and pull tight. Cut off excess Cable Tie and place Blue Cap on end of Cable Tie.
7. Pass E.T. Tape II behind the patient's neck, under the earlobes.
8. Peel backing from Part C.
9. While holding Part A with finger, pull the E.T. Tape II taut, overlapping Part A with Part C (see Fig. C).
10. Firmly press the tape for proper adhesion (see Fig. D).
11. To remove Cable Tie, remove Blue Cap and release lock on Cable Tie (see Fig. F)
12. E.T. Tape II may be cut to proper length to fit smaller patients.
13. Periodically inspect E.T. Tape II™ for loss of adhesion on face or E.T. Tube. Replace immediately if this occurs.

**CAUTION:** Single Patient Use Only • Non Sterile  
• Disposable • DO NOT REPROCESS or REUSE

Spanish, German, French on reverse side

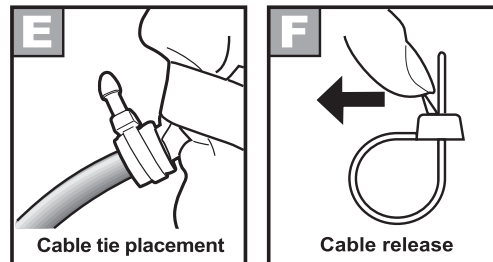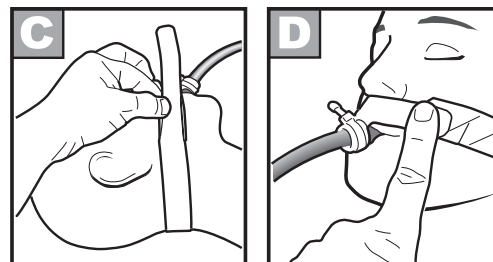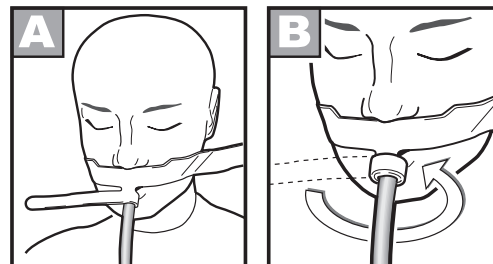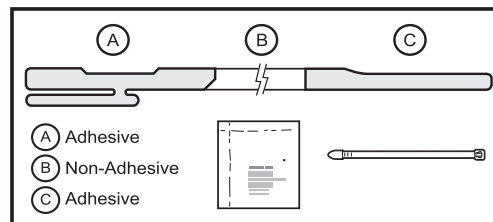

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to the manufacturer and competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

An instructional application video can be found at  
[www.bandb-medical.com/et-tape-ii](http://www.bandb-medical.com/et-tape-ii)

## LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS ANTES DE USAR:

1. Limpie el área de la piel del paciente y de aplicación de E.T. Tube y séquese sea seguro que toda la humedad y secreciones están quitadas.
2. Aplique La Preparación De la Piel el ventilador de la piel y de aplicación de E.T. Tube áreas y seco por 25 segundos.
3. Forro de la cáscara de la parte A. Secure el E.T. Tape II a la piel de los pacientes con la T-Lengueta directamente sobre el E.T. Tube. (Fig. A).
4. Envuelva la pierna corta de la T-Lengueta en una dirección a la derecha alrededor del E.T. Tube.
5. Envuelva firmemente la pierna larga de la T-Lengueta en una dirección a la izquierda que traslapa la pierna corta. Este abrigo debe ser muy apretado en cuanto a la compresa la espuma, eliminando cualquier boquete que permitieran que las secreciones consiguieran entre el E.T. Tape II y el E.T. Tube. (Fig. B).
6. Atadura de cables del abrigo alrededor de la T-lengueta y tubo endotracheal y tirón firmemente. Corte exceso de la atadura de cables y coloque el casquillo azul en el extremo de la atadura de cables.
7. Pase el E.T. Tape II detrás del cuello del paciente, bajo earlobe.
8. Forro de la cáscara de la parte C.
9. Mientras que lleva a cabo la parte A con el dedo, tire del E.T. Tape II parte tensa, traslapada A con la parte C. (Fig. C).
10. Presione firmemente la cinta para asegurar la adherencia apropiada. (Fig. D).
11. Para quitar la atadura de cables, quite el casquillo y el releas azules con Releasable con la atadura de cables. (Fig. F)
12. E.T. TAPE II puede ser cortado a la longitud apropiada en pacientes más pequeños.
13. Examine periódicamente a E.T. Tape II para a de adherencia en la cara o E.T. Tube y substituya inmediatamente si ocurre esto.

**PRECAUCIÓN:** Solo Uso Paciente Solamente – Disponible – No estéril – **CNO REUTILICE**

Encontrará un vídeo con las instrucciones de aplicación en [www.bandb-medical.com/et-tape-ii](http://www.bandb-medical.com/et-tape-ii)

## VOR VERWENDUNG DIE ANWEISUNGEN VOLLSTÄNDIG DURCHLESEN:

1. Die Haut des Patienten und die Applikationsstelle für den endotrachealen Schlauch reinigen und trocknen. Alle Körpersekrete und sämtliche Feuchtigkeit müssen entfernt werden.
2. Die Hautreinigungslösung sowohl auf die Haut als auch auf die Applikationsstelle für den endotrachealen Schlauch auftragen und mit einem Föhn 25 Sekunden lang trocknen.
3. Die Schutzfolie von Teil A abziehen. E. T. Tape II direkt auf der Haut des Patienten andrücken, so dass die T-Lasche direkt über dem endotrachealen Schlauch liegt (Abbildung A).
4. Die kurze Seite der T-Lasche um den endotrachealen Schlauch wickeln.
5. Die lange Seite der T-Lasche fest um die kurze Seite wickeln. Diese Verbindung muss sehr straff sein, damit der Schaumstoff zusammengedrückt wird und keine Spalten entstehen können, durch die Sekrete zwischen E. T. Tape II und den endotrachealen Schlauch gelangen können (siehe Abbildung B).
6. Das Befestigungsband um die T-Lasche und den endotrachealen Schlauch wickeln und festziehen. Überstehendes Band abschneiden, und die blaue Kappe auf das Ende aufsetzen.
7. Das E. T. Tape II unter den Ohrfläppchen am Nacken des Patienten anbringen.
8. Die Schutzfolie für die Klebfläche von Teil C abziehen.
9. Teil A mit dem Finger festhalten und das E. T. Tape II Band strammziehen abziehen, so dass sich Teil A und Teil C überlappen (siehe Abbildung C).
10. Das Band fest andrücken, damit es fest sitzt (siehe Abbildung D).
11. Zum Lösen des Befestigungsbandes die blaue Kappe entfernen und das Band lösen.
12. E. T. Tape II kann bei kleineren Patienten auf passende Länge zugeschnitten werden.
13. E. T. Tape II regelmäßig auf festen Sitz am Gesicht bzw. am endotrachealen Schlauch kontrollieren und sofort ersetzen, wenn dieser nicht mehr gewährleistet ist.

**ACHTUNG:** Nur für einen Patienten – Einwegmaterial – Unsteril – **Nicht wiederverwenden**

Ein Demonstrationsvideo zur Anwendung finden Sie unter [www.bandb-medical.com/et-tape-ii](http://www.bandb-medical.com/et-tape-ii)

## LISEZ LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES AVANT UTILISATION:

1. Nettoyer et séchez la peau du patient et la surface d'application de l'endotrachéal tube. Soyez sûr d'enlever toute humidité et sécrétions.
2. Appliquez skin Prep™ à la peau et à l'endotrachéal surface d'application du tube et ventilez pendant 25 secondes.
3. Décollez la partie A. Fixez E.T. Tape II à la peau du patient avec la T-Étiquette directement au-dessus de l'endotrachéal Tube. (Fig. A)
4. Enroulez la partie courte de la T-Étiquette dans un sens horaire autour de l'endotrachéal Tube.
5. Enveloppez étroitement la longue partie de la T-Étiquette dans un sens anti-horaire recouvrant la partie courte. Ceci doit être assez fort pour comprimer la mousse empêchons les sécrétions entre E.T. Tape II et l'endotrachéal Tube. (Fig. B).
6. Enroulez la serre câble autour de la T-Étiquette et du tube endotrachéal et tirez fortement. Découpez la serre câble excessif et placez le chapeau bleu sur l'extrémité de la serre câble.
7. Passez E.T. Tape II derrière le cou du patient, sous les oreilles
8. Décollez la partie C.
9. Tout en tenant la partie A avec le doigt, tirez E.T. Tape II tendu, recouvrez la partie A avec la partie C. (Fig. C).
10. Serrez fermement la bande pour assurer l'adhérence efficace. (Fig. D).
11. Pour enlever la serre câble, enlevez le chapeau bleu et libérez avec la serre câble déclencheur. (Fig. F)
12. E.T. Tape II™ peut être raccourci pour des petits patients.
13. Inspectez périodiquement E.T. Tape II pour la perte d'adhérence sur le visage ou l'endotrachéal tube et remplacez immédiatement si ceci se produit.

**ATTENTION:** A usage unique – Jetable – Non stérile – **NE RÉUTILISEZ PA**

Vous pouvez visionner une vidéo d'instruction à l'adresse [www.bandb-medical.com/et-tape-ii](http://www.bandb-medical.com/et-tape-ii)